



SurgiTrack

Εγχειρίδιο χρήσης

Ιχνηλασιμότητα χειρουργικών εργαλείων και Σετ

Έκδοση 0.29.6 · 9/10/2026 · www.surgitrack.eu

Περιεχόμενα

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ξεκινώντας | 12. Μαζική εισαγωγή |
| 2. Από την αγορά στη λειτουργία | 13. Έλεγχος ονομασιών |
| 3. Καρτέλα Σετ / εργαλείου | 14. Μεμονωμένα σε χρήση |
| 4. Επισκόπηση | 15. Απόθεμα εργαλείων |
| 5. Σετ & Εργαλεία τμήματος | 16. Αντικαταστάσεις & Παραγγελίες |
| 6. Αποστείρωση | 17. Εκκρεμότητες |
| 7. Λήξεις αποστείρωσης | 18. Αναφορές & Εκτυπώσεις |
| 8. Κάδος | 19. Ιχνηλάτηση |
| 9. Συνδεδεμένες συσκευές | 20. Ιστορικό |
| 10. Εργαλεία | 21. SurgiTrack Studio |
| 11. Σετ εργαλείων | 22. Χρήστες & Τμήματα |
| | Γλωσσάρι |

Ρόλοι

Διαχειριστής νοσοκομείου	Χρήστες, τμήματα, Studio και όλες οι οθόνες του νοσοκομείου.
Προϊστάμενος Αποστείρωσης	Ότι ο Χρήστης Αποστείρωσης, και καταχώριση Σετ και εργαλείων, σύνθεση, Service.
Χρήστης Αποστείρωσης	Παραλαβή, έλεγχος και σύνθεση, κλίβανος, αποδέσμευση, παράδοση.
Χρήστης Τμήματος	Τα Σετ και τα εργαλεία του τμήματός του: αποστολή, παραλαβή, καταμέτρηση, αναφορές.
Παρατηρητής	Βλέπει όλο το νοσοκομείο χωρίς να αλλάζει τίποτα.

Ξεκινώντας

Η πρώτη σας σύνδεση, τι βλέπετε στην οθόνη και πού ζητάτε βοήθεια.

Για ποιον: Όλοι οι χρήστες

Βήμα προς βήμα

1. Ανοίξτε το email έγκρισης και κρατήστε το όνομα χρήστη.
2. Πατήστε «Ορισμός κωδικού» και ορίστε κωδικό.
3. Συνδεθείτε και ανοίξτε τη Βοήθεια (το βιβλίο πάνω δεξιά) σε κάθε οθόνη που δεν γνωρίζετε.

Λογαριασμός

Λογαριασμό ανοίγει μόνο ο διαχειριστής του νοσοκομείου σας. Αν σας έστειλε πρόσκληση ή σύνδεσμο εγγραφής, συμπληρώνετε ονοματεπώνυμο και τμήμα και περιμένετε την έγκρισή του· κωδικό δεν ορίζετε ακόμη.

Πολλές συσκευές

Μπορείτε να δουλεύετε από πολλούς υπολογιστές και tablet μαζί. Κάθε οθόνη παίρνει αμέσως ό,τι αποθήκευσαν ή διέγραψαν οι άλλες (ζωντανός συγχρονισμός)· αν η ζωντανή σύνδεση δεν είναι διαθέσιμη, ελέγχει κάθε 20 δευτερόλεπτα και μόλις επιστρέψετε στο παράθυρο. Ό,τι έχετε αλλάξει εσείς αποθηκεύεται πρώτα. Αν δύο συσκευές αλλάξουν ταυτόχρονα το ίδιο Σετ ή εργαλείο, κρατιούνται και οι δύο αλλαγές όταν αφορούν διαφορετικά πεδία· αν αφορούν το ίδιο πεδίο, κρατιέται αυτή που αποθηκεύτηκε πρώτη και εμφανίζεται μήνυμα «Ταυτόχρονη αλλαγή από άλλη συσκευή» με το πεδίο. Αν χαθεί το δίκτυο, εμφανίζεται κάτω στην οθόνη η ειδοποίηση «Χωρίς σύνδεση στο δίκτυο»: ό,τι καταχωρίσετε κρατιέται σε αυτή τη συσκευή και αποθηκεύεται μόλις επανέλθει η σύνδεση, ακόμη κι αν κλείσει η σελίδα (ανοίξτε την ξανά με τον ίδιο χρήστη). Η συσκευή κρατά αντίγραφο των δεδομένων του νοσοκομείου, ώστε η εφαρμογή να ανοίγει αμέσως και να φέρνει μόνο ό,τι άλλαξε· το αντίγραφο σβήνει με την αποσύνδεση και δεν χρησιμοποιείται αν είναι παλαιότερο από μία ημέρα. Η πάνω μπάρα δείχνει την κατάσταση: «Ζωντανά» (πράσινο) ή «Συγχρονισμός» (γκρι, έλεγχος ανά 20 δευτερόλεπτα), «Αποθήκευση · Ν αλλαγές» όσο αποθηκεύονται και «Δεν αποθηκεύτηκε · νέα προσπάθεια» αν κάτι απέτυχε· κρατώντας το δείκτη από πάνω φαίνεται η ώρα της τελευταίας επικοινωνίας με τον server. Σε tablet οι λίστες κρατούν τις βασικές στήλες: τα μεγάλα ονόματα πιάνουν δύο γραμμές, η σημείωση μιας εκκρεμότητας εμφανίζεται κάτω από το αντικείμενο και, σε κατακόρυφη θέση, κάθε κίνηση του Ιστορικού δείχνει σε δεύτερη γραμμή την ενέργεια και τον χρήστη.

Πρώτη σύνδεση

Μετά την έγκριση λαμβάνετε email «Η πρόσβασή σας εγκρίθηκε» με το όνομα χρήστη σας (π.χ. GN1234), τον ρόλο και το τμήμα σας. Πατήστε «Ορισμός κωδικού», ορίστε κωδικό τουλάχιστον 8 χαρακτήρων και συνδεθείτε με το όνομα χρήστη ή το email σας.

Η οθόνη σας

Το μενού αριστερά δείχνει μόνο όσα επιτρέπει ο ρόλος σας. Μετά τη σύνδεση ανοίγει η Επισκόπηση, αν υπάρχει στο μενού σας· αλλιώς η πρώτη επιλογή του μενού. Στο πεδίο σάρωσης της πάνω μπάρας σαρώνετε ή γράφετε barcode και ανοίγει αμέσως το Σετ ή το εργαλείο. Πάνω δεξιά: γλώσσα (EL/EN), Βοήθεια, προσβασιμότητα (μέγεθος κειμένου, αντίθεση) και ειδοποιήσεις.

Αλλαγές που δεν αποθηκεύτηκαν

Αν φύγετε από μια σελίδα με στοιχεία που δεν έχετε αποθηκεύσει (νέο Σετ ή εργαλείο, επεξεργασία στοιχείων καρτέλας, δικαιώματα ρόλου), η εφαρμογή ρωτά πρώτα «Υπάρχουν αλλαγές που δεν αποθηκεύτηκαν». Η επιλογή «Παραμονή» είναι η προεπιλεγμένη· «Έξοδος χωρίς αποθήκευση» τις απορρίπτει. Το ίδιο ισχύει για την αποσύνδεση· αν κλείσετε ή ανανεώσετε την καρτέλα, ρωτά ο φυλλομετρητής.

Ξεχάσατε τον κωδικό

Στη σελίδα σύνδεσης πατήστε «Ξέχασα τον κωδικό» και γράψτε το email σας· θα λάβετε σύνδεσμο για νέο κωδικό. Μετά από πολλές λάθος προσπάθειες η σύνδεση κλειδώνει για 15 λεπτά. Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να σας στείλει σύνδεσμο αλλαγής κωδικού.

Έλεγχοι

- Βλέπετε το σωστό τμήμα και ρόλο; Αν όχι, ενημερώστε τον διαχειριστή του νοσοκομείου.
- Μην μοιράζετε τον κωδικό σας: κάθε κίνηση καταγράφεται με το όνομά σας.

Συμβουλή. Η Βοήθεια ανοίγει πάντα στη σελίδα της οθόνης που βλέπετε. Για πρόσβαση, κωδικό ή δικαιώματα απευθυνθείτε στον διαχειριστή του νοσοκομείου· για τεχνικό πρόβλημα δείτε «Υποστήριξη».

Από την αγορά στη λειτουργία

Τα βήματα του διαχειριστή του νοσοκομείου, με τη σειρά, από τον πρώτο λογαριασμό έως την πρώτη μέρα πραγματικής χρήσης.

Για ποιον: Διαχειριστής νοσοκομείου

Βήμα προς βήμα

1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής από την πρόσκληση της Exeltos.
2. Τμήματα, βιβλιοθήκες και ροή αποστείρωσης.
3. Μαζική εισαγωγή εργαλείων και Σετ, μετά Έλεγχος ονομασιών.
4. Προσκλήσεις και εγκρίσεις προσωπικού.
5. Εκτυπωτής, σαρωτές, ετικέτες.
6. Εκπαίδευση στο Demo και μέρα έναρξης.

Ο λογαριασμός σας

Η Exeltos δημιουργεί το νοσοκομείο σας και σας στέλνει πρόσκληση διαχειριστή. Από το email ορίζετε κωδικό και συνδέεστε. Αν το νοσοκομείο είναι σε δοκιμαστική περίοδο, όταν λήξει η εφαρμογή κλειδώνει μέχρι την ενεργοποίηση.

Τμήματα και βιβλιοθήκες

Στη Χρήστες & Τμήματα → Τμήματα προσθέστε όλα τα τμήματα (Χειρουργείο, ΜΕΘ, Κεντρική Αποστείρωση...). Στο Studio → Βιβλιοθήκες ελέγξτε ειδικότητες, κατασκευαστές, κλιβάνους και χρωματικές ταινίες· στη Ροή Αποστείρωσης τα στάδια.

Εργαλεία και Σετ

Ετοιμάστε το Excel με το «Πρότυπο Excel» της Μαζικής εισαγωγής (Εργαλεία ή Σετ → «Μαζική εισαγωγή»): μία γραμμή ανά εργαλείο, το όνομα του Σετ σε κάθε γραμμή του. Ελέγξτε την προεπισκόπηση και εισάγετε. Μετά τρέξτε τον «Έλεγχο ονομασιών» ώστε κάθε κωδικός να έχει μία ονομασία.

Προσωπικό

Στη Χρήστες & Τμήματα → Χρήστες → «Προσθήκη χρήστη»: «Πρόσκληση ατόμου» για έναν έναν (email ή σύνδεσμος), «Κοινός σύνδεσμος νοσοκομείου» για πολλούς ή «Από αρχείο CSV». Πρώτα τον Προϊστάμενο Αποστείρωσης, μετά Αποστείρωση και τμήματα. Εγκρίνετε τα αιτήματα (πορτοκαλί) με τον σωστό ρόλο και τμήμα.

Εξοπλισμός

Εκτυπωτής ετικετών barcode στην Αποστείρωση, σαρωτής barcode (USB ή Bluetooth, λειτουργεί ως πληκτρολόγιο) σε κάθε σημείο παράδοσης-παραλαβής, υπολογιστής ή tablet με Chrome ή Edge. Αν οι κλιβανοί θα συνδεθούν, δείτε «Συνδεδεμένες συσκευές». Για το τμήμα πληροφορικής: η εφαρμογή επικοινωνεί μόνο με τον δικό της ιστότοπο και με το Supabase (<https> και <wss> στο

*.supabase.co), δεν φορτώνει τίποτα από τρίτους και δεν ανοίγει μέσα σε ξένες σελίδες· αυτό το επιβάλλουν οι κεφαλίδες ασφαλείας του ιστότοπου.

Εκπαίδευση και έναρξη

Εκπαιδεύστε το προσωπικό στο Demo: ίδιες οθόνες με δοκιμαστικά δεδομένα· την πρόσβαση Demo την ανοίγετε ανά χρήστη στη Χρήστες & Τμήματα. Κολλήστε ετικέτες στα Σετ και στα εργαλεία, ορίστε μέρα έναρξης και από εκείνη τη μέρα κάθε παράδοση και παραλαβή γίνεται με σάρωση.

Έλεγχοι

- Όλα τα τμήματα υπάρχουν και είναι ενεργά.
- Τα Σετ έχουν σωστή σύνθεση και τμήμα· ο Έλεγχος ονομασιών δεν δείχνει εκκρεμότητες.
- Κάθε χρήστης έχει ρόλο και τμήμα· τουλάχιστον ένας Προϊστάμενος Αποστείρωσης.
- Ο εκτυπωτής τυπώνει ετικέτα και ο σαρωτής ανοίγει το Σετ από την πάνω μπάρα.
- Μία δοκιμαστική αποστολή και παραλαβή ολοκληρώθηκε από τμήμα και Αποστείρωση.

Συμβουλή. Για οποιοδήποτε βήμα χρειάζεστε βοήθεια, γράψτε στην Exeltos στο info@exeltos.com (δείτε «Υποστήριξη»).

Καρτέλα Σετ / εργαλείου

Όλα όσα αφορούν ένα Σετ ή εργαλείο: στοιχεία, σύνθεση, ιστορικό, φωτογραφίες, χρήσεις και ενέργειες.

Για ποιον: Όλοι οι χρήστες (οι ενέργειες εξαρτώνται από τον ρόλο)

Βήμα προς βήμα

1. Ελέγξτε την κατάσταση και το υπόλοιπο χρήσεων.
2. Δείτε το ιστορικό για την τελευταία κίνηση.
3. Χρησιμοποιήστε την ενέργεια που χρειάζεστε από πάνω δεξιά.

The screenshot shows the SurgiTrack interface for a 'Καρτέλα Σετ' (Set Card). The set is 'ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ' (Orthopedic Basic). The interface includes a sidebar with navigation options like 'Επισκόπηση', 'Αποστείρωση', 'Συσκευές', 'Λήξεις', 'Εργαλεία', 'Σετ εργαλείων', 'Μεμονωμένα', 'Αποθέμα εργαλείων', 'Εκκρεμότητες', 'Αναφορές', 'Ιστορικό', 'Χρήστες & Τμήμα...', and 'SurgiTrack Studio'. The main content area displays the set's details, including its barcode (5000321), status (Κατάσταση), and usage history. A table lists the components of the set, such as 'KOCHER ΕΥΘΕΙΑ 20 CM', 'ΨΑΛΙΔΙ MAYO ΕΥΘΥ 18 CM', and 'ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 16 CM', along with their respective usage counts and dates.

Στοιχεία

Αριστερά φαίνονται barcode, κωδικός, τμήμα, ειδικότητα, κατασκευαστής, ιδιοκτησία και χρωματική σήμανση. Όσοι έχουν δικαίωμα τα αλλάζουν με «Επεξεργασία».

Χρήσεις και όρια

Για εργαλεία περιορισμένων χρήσεων φαίνεται το υπόλοιπο χρήσεων. Κάθε αποστολή μετά από χρήση αφαιρεί μία χρήση· στο μηδέν το εργαλείο τίθεται αυτόματα εκτός χρήσης.

Ιστορικό και φωτογραφίες

Οι καρτέλες δείχνουν κάθε κίνηση, αναφορά προβλήματος και φωτογραφία του αντικειμένου.

Ενέργειες

Ανάλογα με τον ρόλο: αποστολή προς Αποστείρωση, εκτύπωση barcode και, στο κουμπί «Ενέργειες», αναφορά προβλήματος και διαχείριση (τμήμα, Σετ, Απόθεμα, Service, απώλεια). Μια ενέργεια διαχείρισης αναιρείται από την ειδοποίηση για λίγα δευτερόλεπτα· το ιστορικό κρατά και την αναίρεση.

Προηγούμενη και επόμενη καρτέλα

Όταν ανοίγετε μια καρτέλα από λίστα (Σετ, Εργαλεία, Μεμονωμένα, Απόθεμα), δίπλα στο «Πίσω στη λίστα» φαίνεται π.χ. «3 από 24» με βελάκια < >. Περνάτε στην προηγούμενη ή την επόμενη καρτέλα με τη σειρά και τα φίλτρα της λίστας, και από το πληκτρολόγιο με Alt+← / Alt+→. Το «Πίσω στη λίστα» επιστρέφει πάντα στη λίστα.


Επισκόπηση

Όλο το νοσοκομείο με μια ματιά: Σετ, εργαλεία, ροή αποστείρωσης, εκκρεμότητες και όρια χρήσεων.

Για ποιον: Διαχειριστής νοσοκομείου και Προϊστάμενος Αποστείρωσης

Βήμα προς βήμα

1. Ξεκινήστε από τους δείκτες με πορτοκαλί χρώμα: χρειάζονται προσοχή.
2. Πατήστε τον δείκτη για να δείτε ακριβώς ποια εγγραφές αφορά.
3. Ελέγξτε τις τελευταίες κινήσεις για ό,τι έγινε πρόσφατα.

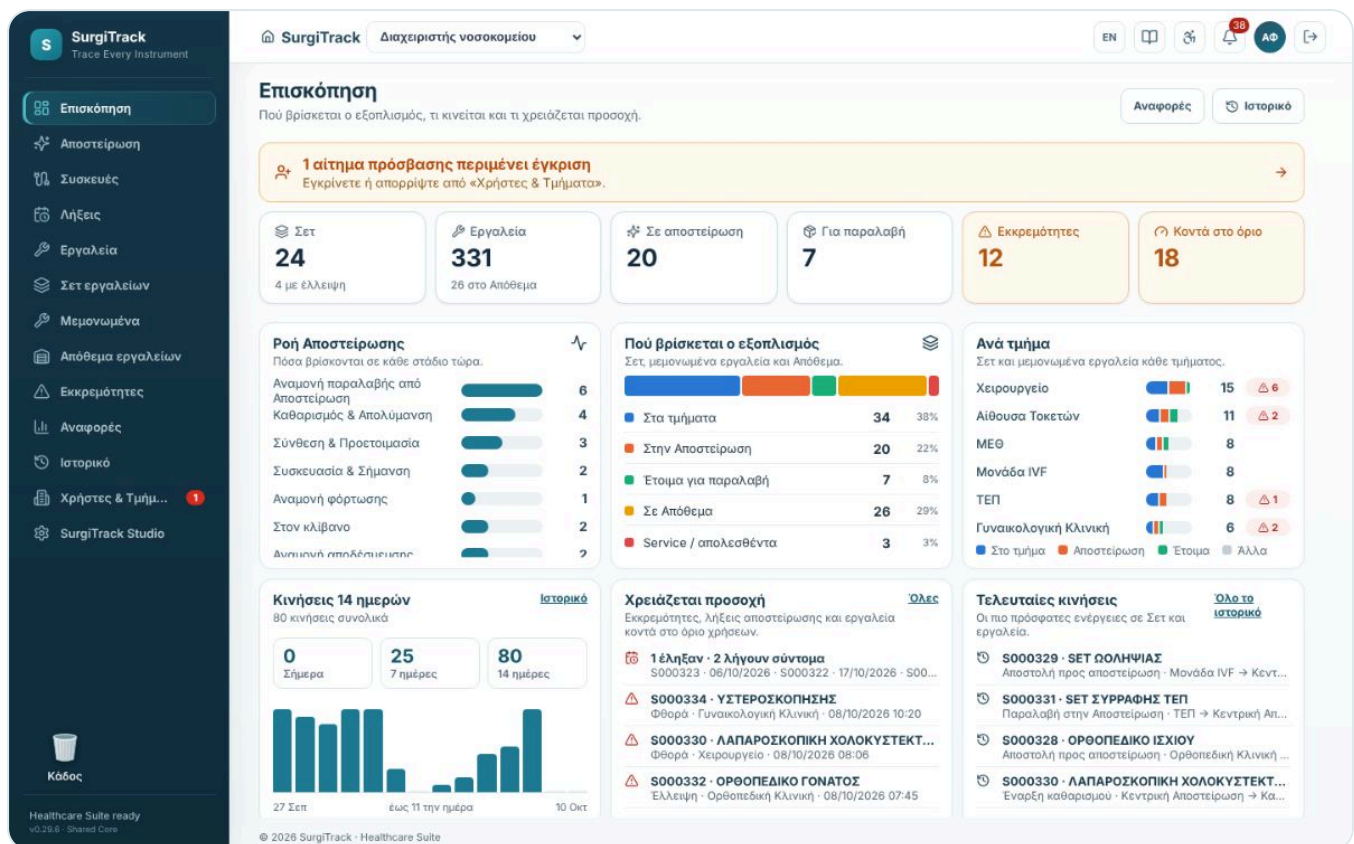

Δείκτες (KPIs)

Κάθε δείκτης στην κορυφή είναι σύνδεσμος. Πατώντας τον ανοίγει η αντίστοιχη λίστα με τα σωστά φίλτρα ήδη εφαρμοσμένα, π.χ. «Κοντά στο όριο χρήσεων» ανοίγει τα Εργαλεία με φίλτρο «Λίγες χρήσεις».

Ανά τμήμα

Ο πίνακας δείχνει τι έχει κάθε τμήμα: στο τμήμα, στην αποστείρωση, έτοιμα και εκκρεμότητες. Πατήστε το όνομα του τμήματος για να δείτε τα Σετ του.

Ροή αποστείρωσης

Οι μπάρες δείχνουν πόσα βρίσκονται σε κάθε στάδιο. Πατώντας ένα στάδιο ανοίγει η Αποστείρωση στην αντίστοιχη καρτέλα.

Συμβουλή. Η Επισκόπηση είναι η αφετηρία της ημέρας: ό,τι είναι κόκκινο ή πορτοκαλί θέλει ενέργεια σήμερα.

Σετ & Εργαλεία τμήματος

Τα Σετ και τα μεμονωμένα εργαλεία του τμήματος και η ηλεκτρονική αποστολή τους στην Κεντρική Αποστείρωση.

Για ποιον: Χρήστες τμήματος

Βήμα προς βήμα

1. Βρείτε το Σετ ή το εργαλείο (αναζήτηση ή σάρωση barcode).
2. Πατήστε «Αποστολή προς Αποστείρωση».
3. Συμπληρώστε κωδικό ασθενούς όπου ζητείται και επιβεβαιώστε.
4. Όταν γίνει «Έτοιμο για παραλαβή», παραλάβετε το από την Αποστείρωση υπογράφοντας με τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό σας.

Χειρουργείο
Τα Σετ και τα εργαλεία του τμήματος, και η αποστολή στην Αποστείρωση.

Στο τμήμα: **8** Σε αποστείρωση: **6** Έτοιμα για παραλαβή: **1** Ανοικτές εκκρεμότητες: **6**

Σετ εργαλείων: 8 Σετ του τμήματος Μεμονωμένα εργαλεία: 7 εργαλεία σε αυτόνομη χρήση

Όνομασία, κωδικός ή barcode...

Κωδικός	Όνομα	Κατηγορία	Εργαλεία	Κατάσταση	Χρήσεις
S000321	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ	ORTHO-BASIC - Ορθοπεδική	14/15 εργαλεία	Στο τμήμα	24/60
S000322	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ	LAP-GEN - Γενική Χειρουργική	12/12 εργαλεία	Έτοιμο για παραλαβή	17/50
S000324	ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ	NEURO-01 - Νευροχειρουργική	10/11 εργαλεία	Σε προετοιμασία	0 χρήσεις
S000330	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ	LAP-CHOLE - Γενική Χειρουργική	13/13 εργαλεία	Καθαρισμός & Απολύμανση	0 χρήσεις
S000333	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ TUR	URO-TUR - Ουρολογία	11/11 εργαλεία	Συσκευασία & Σήμανση	0 χρήσεις
S000335	ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ	GEN-LAPAROT - Γενική Χειρουργική	18/18 εργαλεία	Σε αποστείρωση	0 χρήσεις

Τι βλέπω

Στις δύο καρτέλες βλέπετε τα Σετ και τα μεμονωμένα εργαλεία του τμήματός σας. Οι δείκτες πάνω φιλτράρουν τη λίστα: «Στο τμήμα», «Σε αποστείρωση» (καθ' οδόν ή μέσα στην Αποστείρωση), «Έτοιμα για παραλαβή».

Καταμέτρηση χειρουργείου

Στα χειρουργεία (Studio → Βιβλιοθήκες → Τμήματα → «Καταμέτρηση») η «Αποστολή προς Αποστείρωση» ζητά πρώτα καταμέτρηση. Το κουμπί «Καταμέτρηση» ανοίγει το έντυπο: πάνω το μέρος της Αποστείρωσης (σύνθεση, αποδέσμευση, αποστείρωση και λήξη, κύκλος), κάτω τα

εργαλεία με «Εστάλη» και «Καταμετρήθηκε». Γράφετε τον κωδικό ασθενούς, τσεκάρετε ή σαρώνετε κάθε εργαλείο ή πατάτε «Όλα παρόντα», και «Υπογραφή καταμέτρησης» (όνομα και ώρα). Μετά ενεργοποιείται η αποστολή. Αν λείπουν εργαλεία, ανοίγει εκκρεμότητα και η Αποστείρωση το βλέπει στην Παραλαβή. Το έντυπο τυπώνεται κενό ή υπογεγραμμένο, και από την Εκτύπωση του Σετ.

Αποστολή προς Αποστείρωση

Μετά τη χρήση πατήστε «Αποστολή προς Αποστείρωση». Ο κωδικός ασθενούς είναι προαιρετικός, εκτός αν το Σετ ή το εργαλείο έχει περιορισμένες χρήσεις.

Εργαλεία με όριο χρήσεων

Για εργαλεία πολλαπλών χρήσεων με όριο (π.χ. ρομποτικά), η αποστολή ζητά υποχρεωτικά κωδικό ασθενούς και επιβεβαίωση ότι χρησιμοποιήθηκε: καταγράφεται μία χρήση και φαίνεται το υπόλοιπο. Όταν εξαντληθούν οι χρήσεις, το εργαλείο τίθεται αυτόματα εκτός χρήσης.

Αναφορά προβλήματος

Αν λείπει ή έχει φθορά ένα εργαλείο, ανοίξτε το Σετ, πατήστε «Ενέργειες» → «Αναφορά προβλήματος» και δηλώστε το. Η Αποστείρωση το βλέπει στις Εκκρεμότητες.

Έλεγχοι

- Ο κωδικός ασθενούς δεν περιέχει ονοματεπώνυμο.
- Η χρήση καταγράφηκε για τα εργαλεία περιορισμένων χρήσεων.

Συμβουλή. Σαρώστε το barcode αντί να ψάχνετε με το όνομα: είναι πιο γρήγορο και αποφεύγει λάθη.

Αποστείρωση

Η ροή της Κεντρικής Αποστείρωσης: παραλαβή, καθαρισμός, σύνθεση, συσκευασία, φόρτωση κλιβάνου, αποδέσμευση φορτίου, αποθήκευση και παράδοση.

Για ποιον: Χρήστες και Προϊστάμενος Αποστείρωσης

Βήμα προς βήμα

1. Ανοίξετε την καρτέλα του σταδίου σας.
2. Σαρώστε ή επιλέξτε το αντικείμενο.
3. Ολοκληρώστε τον έλεγχο του σταδίου και προωθήστε το στο επόμενο.

Αποστείρωση
Η ροή του νοσοκομείου από το Studio, με πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Αναζήτηση & σάρωση
Σάρωση barcode ή τηλεχειριστήριο - φιλτράρετε την καρτέλα - Enter ανοίγει το barcode

Barcode, ονομασία, κωδικός ή τμήμα...

Ανοίγμα **Φίλτρα**

Παραλαβή 6 Καθαρισμός 4 Σύνθεση 3 Συσκευασία 2 Φόρτωση 1 Στον κλιβάνο 2 Αποδέσμευση 2 Παράδοση 7

Αλυσίδα φύλαξης Πλύση / απολύμανση Εργαλεία / αποκλίσεις Barrier / σήμανση Κλιβάνος / φορτίο Κύκλος σε εξέλιξη Πύλη ποιότητας Προς τμήμα

Αναμονή φυσικής παραλαβής 6 εγγραφές **Μαζική παραλαβή**

Αντικείμενο	Τμήμα	Σύνθεση / κατάσταση	Ενέργειες
S000327 ΣΕΤ SET ΕΠΙΣΙΟΤΟΜΗΣ	Αίθουσα Τοκετών Μαιευτική	Σύνθεση 8 / 8	Παραλαβή
S000328 ΣΕΤ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΙΣΧΙΟΥ	Ορθοπεδική Κλινική Ορθοπεδική	Σύνθεση 16 / 16 Καταμέτρηση: λείπουν 1	Παραλαβή
S000329 ΣΕΤ SET ΩΛΗΨΙΑΣ	Μονάδα IVF Γυναικολογική	Σύνθεση 8 / 8	Παραλαβή
S000344 ΣΕΤ ΣΕΤ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ (AMBU)	ΜΕΘ Ανασθησιολογία	Σύνθεση 4 / 4	Παραλαβή
T001311 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 16 CM	Αίθουσα Τοκετών Γενική Χειρουργική	Μεμονωμένο εργαλείο	Παραλαβή
T001486 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΧΗΡ ΕΥΘΕΙΑ 20 CM	ΜΕΘ Γενική Χειρουργική	Μεμονωμένο εργαλείο	Παραλαβή

© 2026 SurgiTrack · Healthcare Suite

Καρτέλες σταδίων

Κάθε καρτέλα είναι ένα στάδιο. Ο αριθμός δείχνει πόσα περιμένουν. Τα στάδια που είναι απενεργοποιημένα στο Studio δεν εμφανίζονται. Η μπλε μπάρα «Αναζήτηση & σάρωση» φιλτράρει την καρτέλα καθώς γράφετε· με σάρωση barcode και Enter ανοίγει το αντικείμενο στο στάδιο όπου βρίσκεται. Δίπλα της είναι τα Φίλτρα (τμήμα, ειδικότητα, Σετ ή εργαλεία).

Φυσική παραλαβή

Στην «Παραλαβή» σαρώστε το Σετ και δηλώστε τυχόν εμφανή απόκλιση. Εσείς καταγράφεστε αυτόματα ως παραλαμβάνων· ο παραδίδων του τμήματος υπογράφει με τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό του. Αποκλίσεις (έλλειψη, φθορά) δημιουργούν εκκρεμότητα.

Εκκρεμότητες στη Σύνθεση

Ό,τι χρειάζεται ενέργεια εμφανίζεται ως χρωματισμένη γραμμή στη λίστα εργαλείων του Σετ, με κουμπί «Αντιμετώπιση». Εργαλείο με βλάβη ή άλλη εκκρεμότητα: αντικατάσταση, Service, Απόθεμα ή μεταφορά σε άλλο Σετ. Εργαλείο που λείπει (γραμμή «Λείπει»): «Κάλυψη έλλειψης» με εργαλείο από Απόθεμα, άλλο Σετ ή μεμονωμένο, «Αναφορά», ή «Παραμονή ως έχει» για να συνεχίσει το Σετ με λιγότερα εργαλεία (το ίδιο κάνει και η «Αποδοχή καταγεγραμμένης έλλειψης» στην ενημέρωση της σύνθεσης). Εκκρεμότητα του ίδιου του Σετ: «Διορθώθηκε» με σημείωση για το ιστορικό, ή «Παραμονή ως έχει» (η εκκρεμότητα μένει ανοιχτή).

Παράδοση στο τμήμα

Στην «Παράδοση» εσείς καταγράφεστε αυτόματα ως παραδίδων. Ο παραλαμβάνων του τμήματος υπογράφει με τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό του στην ίδια οθόνη· χωρίς υπογραφή η παράδοση δεν ολοκληρώνεται.

Διάρκεια αποστείρωσης

Στη «Συσκευασία & Σήμανση» διαλέγετε για κάθε Σετ ή εργαλείο διάρκεια 2, 3 ή 6 μηνών· προτείνεται η προεπιλογή του νοσοκομείου. Η διάρκεια μετρά από την αποδέσμευση και η ημερομηνία λήξης φαίνεται στην καρτέλα του. Αν το νοσοκομείο δεν έχει στάδιο συσκευασίας, η διάρκεια επιλέγεται στην προετοιμασία.

Φόρτωση κλιβάνου

Στην καρτέλα «Φόρτωση» όλα τα έτοιμα Σετ και εργαλεία είναι ήδη τσεκαρισμένα· ξετσεκάρετε όσα δεν μπαίνουν και πατήστε ένα κουμπί, «Φόρτωση κλιβάνου». Διαλέγετε τον κλίβανο από τη λίστα του νοσοκομείου, τον αριθμό κύκλου και το πρόγραμμα, και δηλώνετε ποιοι δείκτες μπήκαν στο φορτίο (χημικός, βιολογικός). Αποτέλεσμα δεικτών εδώ δεν δίνεται. Με «Έναρξη κύκλου» το φορτίο μπαίνει στον κλίβανο. Αν διαλέξετε κύκλο από συνδεδεμένη συσκευή, ο κύκλος έχει ήδη τελειώσει και το φορτίο πάει κατευθείαν στην Αποδέσμευση· αν η συσκευή δήλωσε αποτυχία, επιστρέφει σε επανεπεξεργασία.

Στον κλίβανο

Η καρτέλα «Στον κλίβανο» δείχνει τα φορτία που κλιβανίζονται τώρα: κλίβανο, κύκλος, πρόγραμμα, ποιος φόρτωσε και πότε, και τα αντικείμενα. Είναι κλειδωμένα· κανείς δεν μπορεί να τα αλλάξει. Όταν τελειώσει ο κύκλος πατήστε «Τέλος κύκλου»: το φορτίο περνά στην Αποδέσμευση και η οθόνη πηγαίνει εκεί (η Αποδέσμευση είναι πάντα υποχρεωτική)· με «Αποτυχία κύκλου» όλο το φορτίο επιστρέφει σε επανεπεξεργασία.

Αποδέσμευση φορτίου

Στην καρτέλα «Αποδέσμευση» ένα κουμπί, «Αποδέσμευση φορτίου», ανοίγει τα φορτία που περιμένουν· διαλέγετε φορτίο και κλίβανο. Επιβεβαιώνετε φυσικές παραμέτρους και συσκευασίες και γράφετε το αποτέλεσμα των δεικτών που μπήκαν στο φορτίο. Αρκεί ένας επιτυχής δείκτης, εκτός αν η μονάδα απαιτεί συγκεκριμένο. Ανεπιτυχής δείκτης ή «Μη αποδέσμευση» στέλνει όλο το φορτίο σε επανεπεξεργασία. Κλείνοντας την αποδέσμευση τα αντικείμενα περνούν στην «Παράδοση» για να παραδοθούν στο τμήμα (ή πρώτα στην Αποθήκευση, αν το νοσοκομείο την έχει ενεργή).

Έντυπο αποδέσμευσης

Το κουμπί «Έντυπο» (στο «Στον κλίβανο», στην Αποδέσμευση και στα πρόσφατα αποδεσμευμένα φορτία) τυπώνει σε Α4 το έντυπο του φορτίου: τύπο φορτίου, κλίβανο, κύκλο, πρόγραμμα, διάρκεια αποστείρωσης, τους δείκτες με χώρο για να κολλήσετε την ταινία τους, τους ελέγχους, τα αντικείμενα με τη λήξη τους, την απόφαση και την έγκριση με τα στοιχεία του χρήστη και υπογραφή. Από το «Στον κλίβανο» βγαίνει κενό για συμπλήρωση· από την Αποδέσμευση βγαίνει συμπληρωμένο με ό,τι έχετε επιλέξει εκεί (δείκτες, έλεγχοι) και τα στοιχεία του συνδεδεμένου χρήστη· μετά την αποδέσμευση βγαίνει με την καταχωρημένη απόφαση. Τα αντικείμενα δείχνουν την ημερομηνία αποστείρωσης (STERILE) και λήξης (κλεψύδρα)· αν δεν έχει οριστεί διάρκεια, εμφανίζεται η προεπιλογή του νοσοκομείου.

Εκτυπώσεις

Από τη σύνθεση εκτυπώνεται το φύλλο σύνθεσης (Α4, με στήλη ελέγχου και υπογραφές) και η ετικέτα barcode. Η ετικέτα έχει τρία μεγέθη (50×25, 70×35, 100×50 mm) και κεφαλίδα SurgiTrack, λογότυπο, δικό σας κείμενο ή καμία· ο διαχειριστής ορίζει την προεπιλογή του νοσοκομείου.

Έλεγχοι

- Η σύνθεση του Σετ ελέγχθηκε πριν τη συσκευασία.
- Το φορτίο καταγράφηκε με κλίβανο, αριθμό κύκλου και δείκτες.
- Στην αποδέσμευση συμπληρώθηκε τουλάχιστον ένας δείκτης ως επιτυχής.

Συμβουλή. Ένα αντικείμενο σε ενεργή ανάκληση ή χωρίς υπόλοιπο χρήσεων δεν μπορεί να κυκλοφορήσει: η εφαρμογή το σταματά.

Λήξεις αποστείρωσης

Τα αποστειρωμένα Σετ και εργαλεία με την ημερομηνία λήξης τους: όσα λήγουν σύντομα και όσα έληξαν.

Για ποιον: Αποστείρωση και Διαχειριστής

Βήμα προς βήμα

1. Πατήστε «Λήγουν σύντομα» ή «Έληξαν» για να δείτε μόνο αυτά.
2. Φιλτράρετε ανά τμήμα και ανοίξτε το Σετ ή το εργαλείο.
3. Ενημερώστε το τμήμα να το στείλει στην Αποστείρωση πριν χρησιμοποιηθεί.

Πότε ειδοποιεί

Ένα Σετ ή εργαλείο «λήγει σύντομα» τον τελευταίο μήνα της αποστείρωσής του (τις τελευταίες 10 ημέρες για δίμηνη). Τότε εμφανίζεται στο καμπανάκι, στο «Χρειάζεται προσοχή» της Επισκόπησης και σε αυτή τη λίστα· το τμήμα το βλέπει στις δικές του ειδοποιήσεις.

Όταν λήξει

Η εφαρμογή μόνο ειδοποιεί και το κρατά στη λίστα «Έληξαν»· δεν το στέλνει αυτόματα για επανεπεξεργασία. Μόλις σταλεί ξανά στην Αποστείρωση, η λήξη σβήνει και ορίζεται νέα στην επόμενη αποδέσμευση.

Συμβουλή. Η προεπιλεγμένη διάρκεια του νοσοκομείου ορίζεται στο Studio → Ρυθμίσεις.


Κάδος

Ό,τι διαγράφεται μένει 30 ημέρες στον Κάδο και μπορεί να επανέλθει όπως ήταν.

Για ποιον: Αποστείρωση και Διαχειριστής

Βήμα προς βήμα

1. Πατήστε τον Κάδο κάτω αριστερά.
2. Βρείτε την εγγραφή και πατήστε «Επαναφορά».

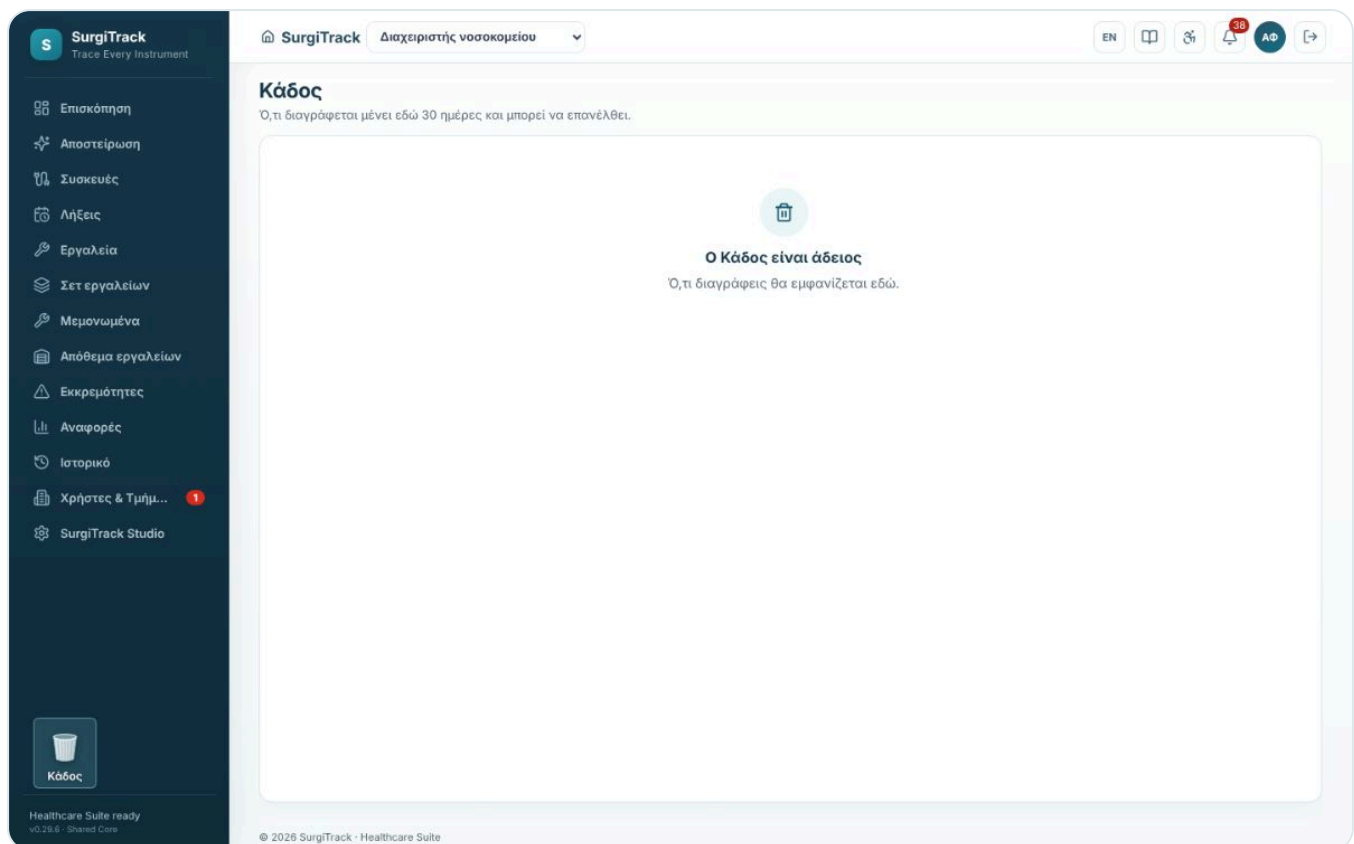

Πού βρίσκεται

Ο Κάδος είναι κάτω αριστερά στο μενού, όπως στον υπολογιστή. Όταν έχει κάτι μέσα δείχνει πόσα είναι.

Επαναφορά

Σετ, εργαλεία, εγγραφές βιβλιοθηκών, χρωματικές ταινίες και συσκευές επανέρχονται όπως ήταν μετά από 30 ημέρες σβήνονται οριστικά. Τις βιβλιοθήκες τις επαναφέρει μόνο ο Διαχειριστής.

Συνδεδεμένες συσκευές

Κλίβανοι, πλυντήρια και άλλες συσκευές που στέλνουν τα δεδομένα των κύκλων τους στο SurgiTrack.

Για ποιον: Αποστείρωση και Διαχειριστής

Βήμα προς βήμα

1. Ο διαχειριστής προσθέτει τη συσκευή και διαλέγει τρόπο σύνδεσης.
2. Για δίκτυο: «Κλειδί δικτύου» και το δίνετε στον τεχνικό του κατασκευαστή.
3. Για αρχείο ή καλώδιο: «Αρχείο» ή «Καλώδιο» στην κάρτα της συσκευής.

The screenshot displays the SurgiTrack web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Επισκόπηση, Αποστείρωση, **Συσκευές** (highlighted), Λήξεις, Εργαλεία, Σει εργαλείων, Μεμονωμένα, Αποθέματα εργαλείων, Εκκρεμότητες, Αναφορές, Ιστορικό, Χρήστες & Τμήμ..., and SurgiTrack Studio. At the bottom of the sidebar is a trash icon labeled 'Κάδος' and a status bar indicating 'Healthcare Suite ready v0.29.6 - Shared Code'.

The main content area is titled 'Συνδεδεμένες συσκευές' (Connected devices) with a subtitle 'Κλίβανοι, πλυντήρια και άλλες συσκευές που στέλνουν δεδομένα κύκλων στην Αποστείρωση.' (Ovens, washers and other devices that send cycle data to Sterilization.). There are buttons for 'Ανανέωση' (Refresh) and '+ Νέα συσκευή' (Add new device).

Two device cards are shown:

- ΚΛΙΒΑΝΟΣ Κλίβανος 1** (Oven 1): MATACHANA · S1000 · S/N MT-2291. It is connected via 'Δίκτυο (αυτόματα)' (Network (automatic)) with ID '...k3f9'. The last cycle was 1042 on 09/10/2026 at 21:38. It has buttons for 'Αρχείο' (File), 'Κλειδί δικτύου' (Network key), and edit/delete icons.
- ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ Πλυντήριο 2** (Washer-disinfectant 2): MIELE · PG 8528 · S/N MI-7781. It is connected via 'Αρχείο (USB)' (File (USB)). A note says 'Δεν έχουν ερθεί δεδομένα ακόμη' (No data has been received yet). It has an 'Αρχείο' button and edit/delete icons.

Below the devices is a section titled 'Κύκλοι - Κλίβανος 1' (Cycles - Oven 1) with a subtitle '«Καταχωρήθηκε» σημαίνει ότι ο κύκλος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε καταγραφή της Αποστείρωσης.' (Registered means the cycle has already been used in the sterilization record.). There is a 'Λήψη' (Download) button.

Έναρξη	Κύκλος	Πρόγραμμα	Αποτέλεσμα	°C	bar	Λεπτά	Πηγή	Χρήση
09/10/2026 21:38	1042	134°C 5'	Επιτυχία	134.6	3.1	52	Δίκτυο (αυτόματα)	Ελεύθερος

At the bottom of the main area, it says '© 2026 SurgiTrack · Healthcare Suite'.

Τρεις τρόποι σύνδεσης

Δίκτυο: η συσκευή ή το λογισμικό του κατασκευαστή στέλνει κάθε κύκλο αυτόματα με ένα κλειδί συσκευής. **Αρχείο:** εξαγάγετε τους κύκλους σε USB (CSV ή Excel) και τους ανεβάζετε. **Καλώδιο:** η συσκευή συνδέεται σε υπολογιστή της Αποστείρωσης (Chrome ή Edge) και ό,τι τυπώνει διαβάζεται αυτόματα.

Αυτόματη συμπλήρωση κύκλου

Στην καταγραφή κύκλου ή φορτίου εμφανίζονται οι νέοι κύκλοι των συσκευών. Το «Χρήση» συμπληρώνει κλίβανο, αριθμό κύκλου και πρόγραμμα· εσείς ελέγχετε και επιβεβαιώνετε. Αποτυχημένος κύκλος της συσκευής σημειώνεται ως αποτυχία.

Αρχειο

Κάθε συσκευή κρατά τους κύκλους της με θερμοκρασία, πίεση, διάρκεια και αποτέλεσμα. Το «Λήψη» τους κατεβάζει σε Excel ή CSV για έλεγχο ή επιθεώρηση.

Εργαλεία

Το γενικό μητρώο όλων των φυσικών εργαλείων, σε Σετ, μεμονωμένα ή στο Απόθεμα.

Για ποιον: Αποστείρωση και Διαχειριστής

Βήμα προς βήμα

1. Αναζητήστε με όνομα, κωδικό, barcode ή serial.
2. Περιορίστε με τα φίλτρα.
3. Ανοίξτε το εργαλείο για λεπτομέρειες και ενέργειες.

Εργαλεία
Όλα τα φυσικά εργαλεία: σε απόθεμα, σε σετ ή μεμονωμένα.

Σύνολο εργαλείων: **331** Σε Σετ: **265** Μεμονωμένα σε χρήση: **40** Απόθεμα: **26**

Όνομασία, κωδικός, barcode, serial...

Όνομασία	Barcode	Ειδικότητα	Θέση	Χρήσεις	Κατάσταση
KOCHER ΕΥΘΕΙΑ 20 CM DEWIMED · 12.320.20 · S/N SN-20001	T001201	Γενική Χειρουργική	Σετ S000321 · ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ	40 / 50	Στο τμήμα
ΨΑΛΙΔΙ MAYO ΕΥΘΥ 18 CM AESCULAP · 08.280.18 · S/N SN-20002	T001202	Γενική Χειρουργική	Σετ S000321 · ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ	39 / 50	Στο τμήμα
ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ MAYO-HEGAR 20 CM DEWIMED · 24.180.20 · S/N SN-20003	T001203	Γενική Χειρουργική	Σετ S000321 · ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ	38 / 50	Στο τμήμα
ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 16 CM AESCULAP · 10.110.16 · S/N SN-20004	T001204	Γενική Χειρουργική	Σετ S000321 · ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ	Χωρίς όριο	Στο τμήμα
ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 16 CM KLS MARTIN · 11.410.16 · S/N SN-20005	T001205	Γενική Χειρουργική	Σετ S000321 · ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ	Χωρίς όριο	Στο τμήμα
ΑΓΚΙΣΤΡΟ LANGENBECK AESCULAP · 42.300.01 · S/N SN-20006	T001206	Γενική Χειρουργική	Σετ S000321 · ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ	Χωρίς όριο	Στο τμήμα
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 5MM KARL STORZ · 70.510.05 · S/N SN-20007	T001207	Γενική Χειρουργική	Σετ S000321 · ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ	14 / 30	Στο τμήμα
KOCHER ΕΥΘΕΙΑ 20 CM DEWIMED · 12.320.20 · S/N SN-20008	T001208	Γενική Χειρουργική	Σετ S000321 · ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ	33 / 50	Στο τμήμα

Φίλτρα

Όλα τα φίλτρα βρίσκονται στο κουμπί «Φίλτρα»: τμήμα, ειδικότητα, εταιρεία, θέση, κατάσταση και τύπος χρήσης. Οι δείκτες πάνω από τη λίστα φιλτράρουν με ένα κλικ.

Τύπος χρήσης

«Με όριο χρήσεων» δείχνει εργαλεία με όριο χρήσεων, «Λίγες χρήσεις» όσα πλησιάζουν στο όριο και «Χωρίς όριο» τα υπόλοιπα.

Καρτέλα εργαλείου

Πατώντας ένα εργαλείο βλέπετε ιστορικό, φωτογραφίες, χρήσεις, χρωματική σήμανση και ιδιοκτησία. Το όριο και οι χρήσεις αλλάζουν μόνο από τον Διαχειριστή και τον Προϊστάμενο

Αποστείρωσης.

Εισαγωγή και ονομασίες

Το «Μαζική εισαγωγή» φέρνει εργαλεία και Σετ από Excel. Το «Έλεγχος ονομασιών» βρίσκει γραφές που διαφέρουν και κωδικούς με πολλές ονομασίες και τα ενοποιεί.

Συμβουλή. Η λίστα φορτώνει σταδιακά καθώς κάνετε κύλιση· για να βρείτε κάτι γρήγορα χρησιμοποιήστε την αναζήτηση.

Σετ εργαλείων

Το μητρώο των Σετ με σύνθεση, τμήμα, κατάσταση και πληρότητα.

Για ποιον: Αποστείρωση και Διαχειριστής

Βήμα προς βήμα

1. Βρείτε το Σετ με αναζήτηση ή φίλτρα.
2. Ανοίξετε το για σύνθεση, ιστορικό και ενέργειες.
3. Εκτυπώστε το φύλλο σύνθεσης όταν χρειάζεται.

Σετ εργαλείων
Μητρώο Σετ με Εξχωριστά πεδία Ονομασίας, Κωδικού και μοναδικού Barcode.

Σύνολο Σετ: **24** Στο τμήμα: **7** Έτοιμα για παραλαβή: **4** Σετ με έλλειψη: **4**

🔍 Ονομα Σετ, κωδικός ή barcode... 🏠 Φίλτρα

Όνομα Σετ	Barcode	Ειδικότητα	Τμήμα	Εργαλεία	Κατάσταση	Λήξη
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ AESCULAP - ORTHO-BASIC	5000321	Ορθοπεδική	Χειρουργείο	14 / 15	Στο τμήμα	06/02/2027
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ KARL STORZ - LAP-GEN	5000322	Γενική Χειρουργική	Χειρουργείο	12 / 12	Έτοιμο για παραλαβή	17/10/2026
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΗΣ DEWIMED - GYN-LAP	5000323	Γυναικολογική	Γυναικολογική Κλινική	13 / 14	Στο τμήμα	06/10/2026
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ KLS MARTIN - NEURO-01	5000324	Νευροχειρουργική	Χειρουργείο	10 / 11	Σύνθεση & Προετοιμασία	—
ΣΕΤ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ AESCULAP - DELIVERY-01	5000325	Μαιευτική	Αίθουσα Τοκετών	10 / 11	Στο τμήμα	02/11/2026
ΣΕΤ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ DEWIMED - CSECTION-01	5000326	Μαιευτική	Αίθουσα Τοκετών	12 / 12	Έτοιμο για παραλαβή	26/03/2027
ΣΕΤ ΕΠΙΣΙΟΤΟΜΗΣ KLS MARTIN - EPISIO-01	5000327	Μαιευτική	Αίθουσα Τοκετών	8 / 8	Αναμονή παραλαβής από Αποστείρωση	—
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΙΣΧΙΟΥ AESCULAP - ORTHO-HIP	5000328	Ορθοπεδική	Ορθοπεδική Κλινική	16 / 16	Αναμονή παραλαβής από Αποστείρωση	—
ΣΕΤ ΩΛΗΨΙΑΣ KARL STORZ - IVF-OPU	5000329	Γυναικολογική	Μονάδα IVF	8 / 8	Αναμονή παραλαβής από Αποστείρωση	—
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ KARL STORZ - LAP-CHOLE	5000330	Γενική Χειρουργική	Χειρουργείο	13 / 13	Καθαρισμός & Απολύμανση	—

© 2026 SurgiTrack - Healthcare Suite

Σύνθεση

Κάθε Σετ έχει πρότυπη σύνθεση (τι πρέπει να περιέχει) και τα πραγματικά εργαλεία του. Όταν λείπει κάτι, το Σετ εμφανίζεται «Με έλλειψη».

Διαχείριση σύνθεσης

Ο Προϊστάμενος Αποστείρωσης προσθέτει εργαλεία από το Απόθεμα ή αφαιρεί εργαλεία. Εργαλείο με δικό του χρώμα που μπαίνει σε Σετ ρωτά αν κρατά το χρώμα του.

Ιδιοκτησία

Ένα Σετ μπορεί να ανήκει στο νοσοκομείο, σε ιατρό ή σε άλλον. Το όνομα του ιατρού εμφανίζεται και στην αναζήτηση.

Μαζική εισαγωγή

Εισαγωγή εργαλείων και Σετ από Excel ή CSV, με προεπισκόπηση πριν γραφτεί οτιδήποτε.

Για ποιον: Διαχειριστής και Προϊστάμενος Αποστείρωσης

Βήμα προς βήμα

1. Εργαλεία ή Σετ → «Μαζική εισαγωγή».
2. Κατεβάστε το πρότυπο και συμπληρώστε το.
3. Σύρετε το αρχείο στη σελίδα.
4. Ελέγξτε προεπισκόπηση, προβλήματα και ονομασίες.
5. Πατήστε «Εισαγωγή».

Μαζική εισαγωγή εργαλείων και Σετ
Από Excel ή CSV, μία γραμμή ανά εργαλείο. Ελέγχεται πριν γραφτεί και αναιρείται ολόκληρη.

1 Αρχείο 2 Αντιστοίχιση 3 Έλεγχος 4 Εισαγωγή

Σύρετε εδώ το αρχείο ή πατήστε για επιλογή
Excel (.xlsx) ή CSV - για «Γενικό Νοσοκομείο Δοκιμών»

Πώς διαβάζεται το αρχείο
Μία γραμμή ανά εργαλείο. Παράδειγμα:

ΣΕΤ	ΕΡΓΑΛΕΙΟ	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣ.
Λαπαροτομία 1	Λαβίδα Kocher	Χειρουργείο	4
Λαπαροτομία 1	Ψαλίδι Metzenbaum	Χειρουργείο	2
—	Άγκιστρο Farabeuf	ΜΕΘ	1
—	Λαβίδα Pean	—	3

- Ίδιο όνομα Σετ = ένα Σετ: εδώ ένα Σετ με 6 εργαλεία (4 + 2).
- Χωρίς Σετ: μεμονωμένο εργαλείο του τμήματος, ή Απόθεμα αν δεν έχει τμήμα.
- Ποσότητα 4 = τέσσερα εργαλεία, καθένα με δικό του barcode. Όσα barcodes λείπουν δίνονται αυτόματα.
- Δύο ίδια Σετ (π.χ. δύο «Λαπαροτομίες»): δώστε τους διαφορετικό όνομα ή barcode Σετ.

Εισαγωγές σε αυτό το νοσοκομείο
Καμία εισαγωγή ακόμη.

Το αρχείο

Κατεβάστε το «Πρότυπο Excel». Μία γραμμή ανά εργαλείο: Σετ, κωδικός, όνομα εργαλείου (υποχρεωτικό), ποσότητα, τμήμα, ειδικότητα, κατασκευαστής, μέγιστες χρήσεις, σειριακός αριθμός. Ίδιο όνομα Σετ = ίδιο Σετ· κενό Σετ = μεμονωμένο εργαλείο· κενό τμήμα = Απόθεμα.

Προεπισκόπηση

Πριν την εισαγωγή βλέπετε πόσα Σετ, μεμονωμένα και εργαλεία Αποθέματος θα δημιουργηθούν, τη λίστα εργαλείων με αναζήτηση και τις γραμμές με πρόβλημα. Οι στήλες αναγνωρίζονται αυτόματα· αν μια στήλη δεν βρέθηκε, την αντιστοιχίζετε με το χέρι.

Ονομασίες

Η εισαγωγή μπορεί να γράψει τις ονομασίες ενιαία (κεφαλαία χωρίς τόνους, ίδια γραφή μονάδων) και να χρησιμοποιήσει την ονομασία που ήδη έχει το νοσοκομείο για τον ίδιο κωδικό, ώστε να μη δημιουργηθούν διπλές ονομασίες.

Αναίρεση

Κάθε εισαγωγή εμφανίζεται στις «Εισαγωγές σε αυτό το νοσοκομείο» και αναιρείται ολόκληρη με «Αναίρεση εισαγωγής», όσο κανένα αντικείμενό της δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Έλεγχοι

- Τα ονόματα τμημάτων είναι ίδια με αυτά της Διαχείρισης νοσοκομείου.
- Οι γραμμές με πρόβλημα διορθώθηκαν ή δεν χρειάζονται.
- Μετά την εισαγωγή: «Έλεγχος ονομασιών».

Έλεγχος ονομασιών

Ενιαίες ονομασίες εργαλείων: διορθώσεις γραφής και κωδικοί που έχουν περισσότερες από μία ονομασίες.

Για ποιον: Διαχειριστής και Προϊστάμενος Αποστείρωσης

Βήμα προς βήμα

1. Εργαλεία → «Έλεγχος ονομασιών».
2. Εφαρμόστε τις διορθώσεις γραφής.
3. Περάστε τους κωδικούς με πολλές ονομασίες· ο αριθμός εργαλείων ανοίγει τη λίστα τους.
4. Ενημερώστε τις συνθέσεις αν το ζητήσει.

Έλεγχος ονομασιών
Μία ονομασία ανά εργαλείο. Κάθε αλλαγή καταγράφεται και αναιρείται.

Εργαλεία: **331** | Διαφορετικές ονομασίες: **21** | Διορθώσεις γραφής: **7** (50 εργαλεία) | Κωδικοί με πολλές ονομασίες: **0** (0 με πιθανό λάθος κωδικό)

Διορθώσεις γραφής: 7 | Ίδιος κωδικός, πολλές ονομασίες: 0

Διορθώσεις χωρίς ρίσκο
Κενά, κεφαλαία χωρίς τόνους, γράμματα από λάθος πληκτρολόγιο (π.χ. λατινικό Η σε ελληνική λέξη) και μονάδες (12cm → 12 CM). Το νόημα της ονομασίας δεν αλλάζει.

Εφαρμογή σε 50 εργαλεία

ΣΗΜΕΡΑ	ΘΑ ΓΙΝΕΙ	ΕΡΓΑΛΕΙΑ
☒ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 5MM	→ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 5 MM	42
☒ ΛΑΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ MACINTOSH No 3	→ ΛΑΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ MACINTOSH NO 3	2
☒ ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ AMBU No 4	→ ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ AMBU NO 4	2
☒ ΛΑΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ MACINTOSH No 4	→ ΛΑΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ MACINTOSH NO 4	1
☒ ΛΑΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ MILLER No 1	→ ΛΑΜΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ MILLER NO 1	1
☒ ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ AMBU No 2	→ ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ AMBU NO 2	1
☒ ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ AMBU No 5	→ ΜΑΣΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ AMBU NO 5	1

Διορθώσεις γραφής

Διορθώσεις χωρίς ρίσκο: διπλά κενά, τόνοι, πεζά, λατινικά γράμματα μέσα σε ελληνική λέξη (και αντίστροφα), «12cm» → «12 CM». Αφήστε επιλεγμένες όσες θέλετε και πατήστε «Εφαρμογή σε ... εργαλεία».

Ίδιος κωδικός

Για κάθε κωδικό με πολλές ονομασίες η εφαρμογή προτείνει την πιο συχνή. Επιλέξτε ποιες ονομασίες μπαίνουν στην ενοποίηση, την τελική ονομασία (ή γράψτε άλλη) και πατήστε «Ενοποίηση». Το «Πιθανό λάθος κωδικός» σημαίνει άλλο εργαλείο με λάθος κωδικό: διορθώστε το από την καρτέλα του.

Συνθέσεις Σετ

Η αλλαγή ονομασίας περνά και στις πρότυπες συνθέσεις των Σετ. Αν εμφανιστεί «Συνθέσεις Σετ με παλιές ονομασίες», πατήστε «Ενημέρωση συνθέσεων».

Συμβουλή. Κάθε αλλαγή αναιρείται από την ειδοποίηση που εμφανίζεται αμέσως μετά.

Μεμονωμένα σε χρήση

Εργαλεία που χρησιμοποιούνται αυτόνομα σε τμήματα, εκτός Σετ.

Για ποιον: Αποστείρωση και Διαχειριστής

Βήμα προς βήμα

1. Φιλτράρετε με τμήμα ή τύπο χρήσης.
2. Ανοίξτε το εργαλείο για λεπτομέρειες.

SurgiTrack Διαχειριστής νοσοκομείου

Μεμονωμένα εργαλεία σε χρήση
Εργαλεία που χρησιμοποιούνται αυτόνομα σε τμήματα, εκτός Σετ.

Σε χρήση: **40** | Τμήματα: **8** | Με όριο χρήσεων: **27** | Λίγες χρήσεις: **8**

Q Ονομασία, κωδικός ή barcode...

Φίλτρα

Όνομασία	Barcode	Ειδικότητα	Τμήμα	Χρήσεις	Κατάσταση
KOCHER ΕΥΘΕΙΑ 20 CM DEWIMED - 12.320.20	T001294	Γενική Χειρουργική	ΜΕΘ	38 / 50	Στο τμήμα
ΨΑΛΙΔΙ ΜΑΥΟ ΕΥΘΥ 18 CM AESCULAP - 08.280.18	T001295	Γενική Χειρουργική	ΤΕΠ	37 / 50	Στο τμήμα
ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΜΑΥΟ-HEGAR 20 CM DEWIMED - 24.180.20	T001296	Γενική Χειρουργική	Γυναικολογική Κλινική	36 / 50	Στο τμήμα
ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 16 CM AESCULAP - 10.110.16	T001297	Γενική Χειρουργική	Ορθοπεδική Κλινική	Χωρίς όριο	Στο τμήμα
ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 16 CM KLS MARTIN - 11.410.16	T001298	Γενική Χειρουργική	Χειρουργείο	Χωρίς όριο	Στο τμήμα
ΑΓΚΙΣΤΡΟ LANGENBECK AESCULAP - 42.300.01	T001299	Γενική Χειρουργική	ΜΕΘ	Χωρίς όριο	Στο τμήμα
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 5MM KARL STORZ - 70.510.05	T001300	Γενική Χειρουργική	ΤΕΠ	12 / 30	Στο τμήμα
KOCHER ΕΥΘΕΙΑ 20 CM DEWIMED - 12.320.20	T001301	Γενική Χειρουργική	Γυναικολογική Κλινική	31 / 50	Στο τμήμα
ΨΑΛΙΔΙ ΜΑΥΟ ΕΥΘΥ 18 CM AESCULAP - 08.280.18	T001302	Γενική Χειρουργική	Ορθοπεδική Κλινική	30 / 50	Στο τμήμα
ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ ΜΑΥΟ-HEGAR 20 CM DEWIMED - 24.180.20	T001303	Γενική Χειρουργική	Χειρουργείο	29 / 50	Στο τμήμα

© 2026 SurgiTrack - Healthcare Suite

Τι είναι

Μεμονωμένο είναι ένα εργαλείο που ανήκει σε τμήμα και κυκλοφορεί μόνο του. Πολλά ρομποτικά εργαλεία με όριο χρήσεων είναι μεμονωμένα.

Όριο χρήσεων

Οι δείκτες «Με όριο χρήσεων» και «Λίγες χρήσεις» φιλτράρουν τη λίστα. Το υπόλοιπο φαίνεται σε κάθε γραμμή.

Απόθεμα εργαλείων

Διαθέσιμα εργαλεία εκτός Σετ και τμημάτων, έτοιμα να συμπληρώσουν Σετ.

Για ποιον: Αποστείρωση

Βήμα προς βήμα

1. Ανοίξετε «Σετ με έλλειψη» για να δείτε τι λείπει.
2. Ανοίξετε το Σετ και πατήστε «Προσθήκη εργαλείων».
3. Διαλέξτε το εργαλείο από την καρτέλα Απόθεμα.

Αριθμοί και καρτέλες

Πάνω βλέπετε τους αριθμούς του Αποθέματος (εργαλεία, είδη, με όριο χρήσεων, κάτω από το ελάχιστο)· πατώντας μια κάρτα φιλτράρεται η λίστα, και το «Κάτω από το ελάχιστο» ανοίγει τα Ελάχιστα αποθέματα. Από κάτω, οι καρτέλες «Εργαλεία Αποθέματος» και «Ελάχιστα αποθέματα» αλλάζουν τη λίστα.

Προσθήκη σε Σετ

Η προσθήκη γίνεται μέσα από το Σετ: ανοίξετε το Σετ, πατήστε «Προσθήκη εργαλείων» και διαλέξτε από την καρτέλα Απόθεμα. Ο δείκτης «Σετ με έλλειψη» ανοίγει τα Σετ που χρειάζονται συμπλήρωση.

Αντικαταστάσεις & Παραγγελίες

Τα εργαλεία σε Service, με βλάβη ή φθορά, χαμένα ή εκτός χρήσης: αν υπάρχει ίδιο στο Απόθεμα, αντικατάσταση με ένα κλικ, αλλιώς παραγγελία αγοράς.

Για ποιον: Αποστείρωση και Διαχειριστής

Βήμα προς βήμα

1. Φιλτράρετε με αιτία, τμήμα ή διαθεσιμότητα στο Απόθεμα.
2. Αντικαταστήστε από το Απόθεμα όσα έχουν διαθέσιμο.
3. Για τα υπόλοιπα καταχωρήστε παραγγελία αγοράς και εκτυπώστε την.
4. Όταν έρθουν, «Παραλαβή στο Απόθεμα»: τα νέα εργαλεία μπαίνουν στο Απόθεμα με δικά τους barcodes.

Εκκρεμότητες
Προβλήματα που αναφέρθηκαν και εργαλεία που πρέπει να αντικατασταθούν.

Αναφορές προβλημάτων 12 Αντικαταστάσεις & Παραγγελίες 7

Χρειάζονται αντικατάσταση 7 Υπάρχει στο απόθεμα 5 Δεν υπάρχει στο απόθεμα 2 Σε παραγγελία 1

Εργαλεία 7 Παραγγελίες 1

Αναζήτηση barcode, ονομασίας, κωδικού ή Σετ...

Εργαλείο	Σετ / τμήμα	Αιτία	Απόθεμα	Κατάσταση
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ PEAN 14 CM T001533 - 15.340.14 - KLS MARTIN	S000321 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ Χειρουργείο	Service	Όχι	Χρειάζεται αντικατάσταση 01/10/2026 10:15
ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 16 CM T001534 - 10.110.16 - AESCULAP	S000323 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΗΣ Γυναικολογική Κλινική	Service	Ναι - 5	Χρειάζεται αντικατάσταση 04/10/2026 12:40
ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 16 CM T001205 - 11.410.16 - KLS MARTIN	S000321 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ Χειρουργείο	Βλάβη / φθορά Service	Ναι - 3	Χρειάζεται αντικατάσταση 21/08/2026 11:15
ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 16 CM T001535 - 11.410.16 - KLS MARTIN	S000325 SET ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Αίθουσα Τοκετών	Απώλεια	Ναι - 3	Χρειάζεται αντικατάσταση 05/10/2026 09:05
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 5MM T001508 - 70.510.05 - KARL STORZ	— Αίθουσα Τοκετών	Εκτός χρήσης	Ναι - 1	Χρειάζεται αντικατάσταση 13/09/2026 12:20
ΨΑΛΙΔΙ MAYO ΕΥΘΥ 18 CM T001202 - 08.280.18 - AESCULAP	S000321 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ Χειρουργείο	Βλάβη / φθορά Βλάβη	Ναι - 5	Χρειάζεται αντικατάσταση 06/10/2026 15:10
ΨΑΛΙΔΙ METZENBAUM ΚΥΡΤΟ 18 CM T001534 - 10.110.16 - AESCULAP	S000341 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	Βλάβη / φθορά	Όχι	Χρειάζεται αντικατάσταση

Τι εμφανίζεται

Εργαλεία σε Service, με ανοιχτή αναφορά βλάβης ή φθοράς, χαμένα και εκτός χρήσης. Για καθένα: το Σετ στο οποίο ανήκει (ή από το οποίο βγήκε), η αιτία, από πότε, και αν το Απόθεμα έχει ίδιο εργαλείο (ίδιος κωδικός ή, χωρίς κωδικό, ίδια ονομασία).

Αντικατάσταση από Απόθεμα

«Αντικατάσταση» βάζει ένα ίδιο εργαλείο από το Απόθεμα στο Σετ. Αν το χαλασμένο ήταν ακόμα μέσα, βγαίνει για Service. Επιλέξτε πολλά και πατήστε «Αντικατάσταση από Απόθεμα» για όλα μαζί· το ίδιο εργαλείο Αποθέματος δεν δίνεται δύο φορές.

Παραγγελία αγοράς

Για όσα δεν υπάρχουν στο Απόθεμα: επιλέξτε τα και «Παραγγελία αγοράς». Γίνεται μία γραμμή ανά είδος με την ποσότητα, συμπληρώνετε προμηθευτή και σημείωση. Στην καρτέλα «Παραγγελίες» η παραγγελία εκτυπώνεται, σημειώνεται ως παραγγελθείσα ή ακυρωμένη, και με «Παραλαβή στο Απόθεμα» τα νέα εργαλεία καταχωρούνται αυτόματα στο Απόθεμα.

Συμβουλή. Το «Λήψη» (Excel, PDF / Εκτύπωση, CSV) παίρνει ό,τι έχετε επιλέξει, αλλιώς ό,τι δείχνουν τα φίλτρα.

Εκκρεμότητες

Ελλείψεις, φθορές, βλάβες και απώλειες που χρειάζονται διαχείριση.

Για ποιον: Όλοι οι χρήστες

Βήμα προς βήμα

1. Πατήστε την κάρτα «Ανοικτές» (ή «Ανοικτές πάνω από 7 ημέρες» για όσες περιμένουν πολύ).
2. Ανοίξετε την εκκρεμότητα και δείτε σημείωση και φωτογραφίες.
3. Επιλύστε και κλείστε την.

Δημιουργία

Εκκρεμότητα δημιουργείται από την καρτέλα Σετ ή εργαλείου («Ενέργειες» → «Αναφορά προβλήματος») ή αυτόματα από απόκλιση στην παραλαβή. Απώλεια και αποστολή σε Service η Αποστείρωση τις δηλώνει από «Ενέργειες» → «Διαχείριση», γιατί αλλάζουν την κατάσταση· ένα τμήμα δηλώνει την απώλεια ως αναφορά και η Αποστείρωση την επιβεβαιώνει.

Κλείσιμο

Η Αποστείρωση επιλύει την εκκρεμότητα (αντικατάσταση, service, επιστροφή) και την κλείνει. Όλα καταγράφονται στο Ιστορικό.

Δύο καρτέλες

Η Αποστείρωση και ο Διαχειριστής βλέπουν δύο καρτέλες: «Αναφορές προβλημάτων» (ό,τι αναφέρθηκε) και «Αντικαταστάσεις & Παραγγελίες» (τα εργαλεία που πρέπει να αντικατασταθούν, από το Απόθεμα ή με παραγγελία αγοράς).

Αριθμοί

Πάνω από τη λίστα των αναφορών, τέσσερις κάρτες: Σύνολο, Ανοικτές, Ανοικτές πάνω από 7 ημέρες (αυτές που περιμένουν πολύ) και Επιλυμένες. Μετρούν μέσα στο τμήμα, τον τύπο και την αναζήτηση που έχετε επιλέξει· πατώντας μία, η λίστα δείχνει μόνο αυτές. Το ίδιο φίλτρο ημερομηνίας υπάρχει και στα «Φίλτρα».

Αναφορές & Εκτυπώσεις

Έτοιμες αναφορές με φίλτρα και λήψη σε Excel, PDF ή CSV.

Για ποιον: Αποστείρωση και Διαχειριστής

Βήμα προς βήμα

1. Επιλέξτε αναφορά από αριστερά.
2. Ορίστε φίλτρα.
3. Πατήστε «Λήψη» και διαλέξτε Excel, PDF ή CSV.

Αναφορές & Εκτυπώσεις
Επιλέξε αναφορά, όρισε φίλτρα και δες τα αποτελέσματα πριν από εκτύπωση ή PDF.

Αναφορές 9 διαθέσιμες

- Σύνθεση Σετ**
Αναλυτική σύνθεση συγκεκριμένου Σετ.
- Ανά Τμήμα**
Σετ και εργαλεία οργανωμένα ανά τμήμα.
- Ανά Ειδικότητα**
Κατανομή εξοπλισμού ανά ειδικότητα.
- Service & Βλάβες**
Βλάβες, φθορές, απωλείες και εκκρεμότητες.
- Όρια Χρήσεων**
Υπόλοιπο χρήσεων και κρίσιμα όρια.
- Εργαλεία εκτός χρήσης**
Ιστορικό εργαλείων που τέθηκαν εκτός χρήσης (π.χ. συμπλήρωση ορίου χρήσεων).
- Φορτία κλιβάνου**
Φορτία, κύκλοι, δείκτες και αποδεσμεύσεις ανά κλιβάνο.
- Λήξεις αποστείρωσης**
Αποστειρωμένο Σετ και εργαλεία με διάρκεια και ημερομηνία λήξης.
- Ιχνηλασιμότητα Ασθενούς**
Κινήσεις Σετ/εργαλείων βάσει κωδικού ασθενούς.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: Σύνθεση Σετ
Αναλυτική σύνθεση συγκεκριμένου Σετ.

Λήψη

Σετ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ - S000321

S000321 - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΟ
14 εγγραφές

Barcode	Εργαλείο	Κωδικός	Κατασκευαστής	Χρήσεις
T001201	KOCHER ΕΥΘΕΙΑ 20 CM	12.320.20	DEWIMED	10/50
T001202	ΨΑΛΙΔΙ MAYO ΕΥΘΥ 18 CM	08.280.18	AESCULAP	11/50
T001203	ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ MAYO-HEGAR 20 CM	24.180.20	DEWIMED	12/50
T001204	ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 16 CM	10.110.16	AESCULAP	13
T001205	ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 16 CM	11.410.16	KLS MARTIN	14
T001206	ΑΓΚΙΣΤΡΟ LANGENBECK	42.300.01	AESCULAP	15
T001207	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 5MM	70.510.05	KARL STORZ	16/30
T001208	KOCHER ΕΥΘΕΙΑ 20 CM	12.320.20	DEWIMED	17/50
T001209	ΨΑΛΙΔΙ MAYO ΕΥΘΥ 18 CM	08.280.18	AESCULAP	18/50
T001210	ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ MAYO-HEGAR 20 CM	24.180.20	DEWIMED	19/50
T001211	ΛΑΒΙΔΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 16 CM	10.110.16	AESCULAP	20
T001212	ΛΑΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 16 CM	11.410.16	KLS MARTIN	21
T001213	ΑΓΚΙΣΤΡΟ LANGENBECK	42.300.01	AESCULAP	22
T001214	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ 5MM	70.510.05	KARL STORZ	23/30

Διαθέσιμες αναφορές

Σύνθεση Σετ, Ανά Τμήμα, Ανά Ειδικότητα, Service & Βλάβες, Όρια Χρήσεων, Εργαλεία εκτός χρήσης και Ιχνηλασιμότητα Ασθενούς.

Λήψη: Excel, PDF, CSV

Το κουμπί «Λήψη» έχει τρεις επιλογές: «Excel» κατεβάζει τα αποτελέσματα ως πίνακα με φίλτρα, «PDF / Εκτύπωση» ανοίγει προεπισκόπηση A4 για εκτύπωση ή αποθήκευση ως PDF, και «CSV» τα δίνει ως απλό κείμενο για άλλα προγράμματα. Όλες παίρνουν τα αποτελέσματα με τα φίλτρα που έχετε ορίσει. Ο πίνακας χωράει στο πλάτος της οθόνης· τα μεγάλα κείμενα αλλάζουν γραμμή.

Εκτός χρήσης

Εργαλεία που συμπλήρωσαν το όριο χρήσεών τους φεύγουν από τις λίστες και μένουν ως ιστορικό σε αυτή την αναφορά, με ημερομηνία και αιτία.

Ιχνηλάτηση

Η πλήρης διαδρομή ενός Σετ ή εργαλείου, ή όλα όσα χρησιμοποιήθηκαν για έναν ασθενή, σε μια γραμμή χρόνου.

Για ποιον: Αποστείρωση, Προϊστάμενος, Διαχειριστής, Παρατηρητής

Βήμα προς βήμα

1. Σαρώστε το barcode ή γράψτε τον κωδικό ασθενούς.
2. Διαβάστε τη γραμμή χρόνου από την πιο πρόσφατη κίνηση.
3. Κατεβάστε ή εκτυπώστε τα αποτελέσματα αν χρειάζεται.

SurgiTrack Trace Every Instrument

Διαχειριστής νοσοκομείου

Ιχνηλάτηση

Αναζήτηση από barcode Σετ/εργαλείου ή από κωδικό ασθενούς — χωρίς ονοματεπώνυμο ασθενούς.

Q S000330

ΣΕΤ S000330

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ · Χειρουργείο · Καθαρισμός & Απολύμανση

08/10/2026 08:05 • Έναρξη καθαρισμού
Κεντρική Αποστείρωση → Καθαρισμός & Απολύμανση · Demo Χρήστης Αποστείρωσης

08/10/2026 07:55 • Παραλαβή στην Αποστείρωση
Χειρουργείο → Κεντρική Αποστείρωση · Demo Χρήστης Αποστείρωσης

26/09/2026 13:57 • Παράδοση στο τμήμα · υπογραφή παραλαμβάνοντα
Κεντρική Αποστείρωση → Χειρουργείο · Demo Χρήστης Αποστείρωσης

25/09/2026 14:39 • Παραλαβή στην Αποστείρωση
Χειρουργείο → Κεντρική Αποστείρωση · Demo Χρήστης Αποστείρωσης

25/09/2026 13:03 • Αποστολή προς αποστείρωση
Χειρουργείο → Κεντρική Αποστείρωση · Demo Χρήστης Χειρουργείου · Ασθενής PT-2026-0129

18/09/2026 13:57 • Παράδοση στο τμήμα · υπογραφή παραλαμβάνοντα
Κεντρική Αποστείρωση → Χειρουργείο · Demo Χρήστης Αποστείρωσης

17/09/2026 09:39 • Παραλαβή στην Αποστείρωση
Χειρουργείο → Κεντρική Αποστείρωση · Demo Χρήστης Αποστείρωσης

17/09/2026 08:03 • Αποστολή προς αποστείρωση
Χειρουργείο → Κεντρική Αποστείρωση · Demo Χρήστης Χειρουργείου · Ασθενής PT-2026-0128

13/09/2026 13:57 • Παράδοση στο τμήμα · υπογραφή παραλαμβάνοντα
Κεντρική Αποστείρωση → Χειρουργείο · Demo Χρήστης Αποστείρωσης

12/09/2026 10:39 • Παραλαβή στην Αποστείρωση

© 2026 SurgiTrack · Healthcare Suite

Αναζήτηση

Σαρώστε ή γράψτε barcode Σετ (S...) ή εργαλείου (T...), ή κωδικό ασθενούς, και πατήστε «Αναζήτηση». Ο ασθενής αναζητείται μόνο με κωδικό· ονοματεπώνυμο δεν καταγράφεται.

Γραμμή χρόνου

Κάθε κίνηση δείχνει ημερομηνία και ώρα, ενέργεια, από πού προς πού, χρήστη και, όπου υπάρχει, κωδικό ασθενούς. Για Σετ ή εργαλείο, «Άνοιγμα καρτέλας» ανοίγει την καρτέλα του.

Λήψη και εκτύπωση

Το κουμπί «Λήψη» δίνει τα αποτελέσματα σε Excel, CSV ή PDF για εκτύπωση, π.χ. για έλεγχο ποιότητας ή για ανάκληση.

Ιστορικό

Η αλυσίδα φύλαξης: κάθε κίνηση Σετ και εργαλείου, ποιος, πότε και από πού προς πού.

Για ποιον: Όλοι οι χρήστες (οι χρήστες τμήματος βλέπουν μόνο το τμήμα τους)

Βήμα προς βήμα

1. Φιλτράρετε με ημερομηνία ή barcode.
2. Πατήστε μια κίνηση για πλήρεις λεπτομέρειες.

Ιστορικό κινήσεων

Αμετάβλητο ιστορικό παραδόσεων, παραλαβών, ελέγχων και μετακινήσεων.

🔍 Barcode, Σετ/εργαλείο, χρήστης ή κωδικός ασθενούς...

📅 Εμφανίζεται το ιστορικό των τελευταίων 90 ημερών.

📄 251 εγγραφές

Ημερομηνία / ώρα	Σετ / Εργαλείο	Διαδρομή	Ενέργεια	Χρήστης
08/10/2026 08:32	ΣΕΤ S000329 SET ΔΟΛΗΦΝΙΑΣ	Μονάδα IVF > Κεντρική Αποστείρωση	Αποστολή προς αποστείρωση	Demo Χρήστης IVF Ασθενής PT-2026-0181
08/10/2026 08:12	ΣΕΤ S000331 SET ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΠ	ΤΕΠ > Κεντρική Αποστείρωση	Παραλαβή στην Αποστείρωση	Demo Χρήστης Αποστείρωσης
08/10/2026 08:10	ΣΕΤ S000328 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΙΣΧΙΟΥ	Ορθοπεδική Κλινική > Κεντρική Αποστείρωση	Αποστολή προς αποστείρωση	Demo Χρήστης Ορθοπεδικής Ασθενής PT-2026-0188
08/10/2026 08:05	ΣΕΤ S000330 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ	Κεντρική Αποστείρωση > Καθαρισμός & Απολύμανση	Έναρξη καθαρισμού	Demo Χρήστης Αποστείρωσης
08/10/2026 07:55	ΣΕΤ S000330 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ	Χειρουργείο > Κεντρική Αποστείρωση	Παραλαβή στην Αποστείρωση	Demo Χρήστης Αποστείρωσης
08/10/2026 07:40	ΣΕΤ S000332 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟΣ	Καθαρισμός & Απολύμανση > Έλεγχος & Σύνθεση	Ολοκλήρωση καθαρισμού	Demo Χρήστης Αποστείρωσης
08/10/2026 07:20	ΣΕΤ S000333 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ TUR	Έλεγχος & Σύνθεση > Συσκευασία & Σήμανση	Σύνθεση πλήρης	Demo Χρήστης Αποστείρωσης
08/10/2026 07:05	ΣΕΤ S000334 ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ	Συσκευασία & Σήμανση > Αποστείρωση	Φόρτωση στον Κλίσανο Ατμού 01	Demo Χρήστης Αποστείρωσης
08/10/2026 07:05	ΣΕΤ S000335	Συσκευασία & Σήμανση >	Φόρτωση στον Κλίσανο Ατμού 01	Demo Χρήστης

© 2026 SurgiTrack - Healthcare Suite

Πρόσφατο και παλαιότερο ιστορικό

Για να ανοίγει γρήγορα, η εφαρμογή φορτώνει το ιστορικό των τελευταίων 90 ημερών (τις συνθέσεις και τις αποδεσμεύσεις για 7 μήνες, όσο κρατά η μεγαλύτερη διάρκεια αποστείρωσης). Στο Ιστορικό το «Φόρτωση παλαιότερων» φέρνει και τις υπόλοιπες εγγραφές· η Ιχνηλασιμότητα και οι Αναφορές τις φέρνουν μόνες τους. Τίποτα δεν σβήνεται: όλο το ιστορικό μένει στη βάση.

Ποιος έκανε την κίνηση

Κάθε εγγραφή κρατά τον λογαριασμό με τον οποίο καταχωρήθηκε· τον γράφει η ίδια η βάση δεδομένων, όχι η συσκευή, και δεν αλλάζει. Στις λεπτομέρειες της κίνησης φαίνεται ως «Λογαριασμός (από τη βάση)». Αν το όνομα της καταχώρησης δεν είναι του λογαριασμού, ο λογαριασμός εμφανίζεται και στη λίστα με πορτοκαλί χρώμα.

Καθαρισμός ιστορικού (owner)

Μόνο ο owner της πλατφόρμας, μέσα σε νοσοκομείο, βλέπει το «Καθαρισμός ιστορικού». Τσεκάρει τις εγγραφές (ή «Επιλογή όλων των εμφανιζόμενων» μετά από φίλτρα) και πατά «Διαγραφή επιλεγμένων». Η διαγραφή είναι οριστική και καταγράφεται ως νέα εγγραφή «Καθαρισμός ιστορικού · Ν εγγραφές». Για όλους τους άλλους το ιστορικό δεν αλλάζει.

Μορφή ημερομηνίας

Όλες οι ημερομηνίες εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο, ημέρα/μήνας/έτος και ώρα σε 24ωρο: 08/10/2026 13:05. Εγγραφές που καταχωρήθηκαν παλαιότερα ως «8/10/26, 1:05 μ.μ.» εμφανίζονται κι αυτές έτσι· η εγγραφή στη βάση δεν αλλάζει.

Αμετάβλητο

Οι εγγραφές του ιστορικού δεν τροποποιούνται. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα ημερομηνίας, κατεύθυνσης και ενέργειας για να βρείτε μια κίνηση.

SurgiTrack Studio

Ρυθμίσεις του νοσοκομείου: βιβλιοθήκες, στάδια ροής, δικαιώματα ρόλων, χρωματικές ταινίες και όριο προειδοποίησης χρήσεων.

Για ποιον: Διαχειριστής

Βήμα προς βήμα

1. Επιλέξτε ενότητα.
2. Κάντε τις αλλαγές.
3. Αποθηκεύστε· οι αλλαγές ισχύουν αμέσως.

SurgiTrack Studio
Βιβλιοθήκες, ροή αποστείρωσης, δικαιώματα ρόλων και ρυθμίσεις του νοσοκομείου.

Βιβλιοθήκες | Ροή Αποστείρωσης | Ρόλοι | Δικαιώματα | Ρυθμίσεις

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
6 εγγραφές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
6 εγγραφές

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
3 εγγραφές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
6 εγγραφές

ΚΛΙΒΑΝΟΙ
2 εγγραφές

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΜΟΡΤΥΡΕΣ
89 σε χρήση

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Χειρουργικές / κλινικές ειδικότητες.

+ Νέα εγγραφή

Αναζήτηση ονομασίας ή κωδικού...

ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Γενική Χειρουργική	General Surgery	-
Ορθοπαιδική	Orthopaedics	-
Γυναικολογική	Gynaecology	-
Νευροχειρουργική	Neurosurgery	-
Ουρολογία	Urology	-
Αναισθησιολογία	Anaesthesiology	-

© 2026 SurgiTrack · Healthcare Suite

Βιβλιοθήκες

Τμήματα, ειδικότητες, κατασκευαστές, προμηθευτές, κατηγορίες εργαλείων και κλίβανοι. Ό,τι ορίζεται εδώ εμφανίζεται στις επιλογές όλης της εφαρμογής. Στους «Κλιβάνους», η «Προσθήκη κλιβάνων» προσθέτει πολλούς μαζί με τον τρόπο ονομασίας του νοσοκομείου (Κλίβανος Α, Β, C... ή 1, 2, 3...)· η επιλογή μένει για τις επόμενες φορές και οι κλίβανοι εμφανίζονται στη Φόρτωση κλιβάνου.

Δικαιώματα

Ορίστε τι κάνει κάθε ρόλος. Κάποια δικαιώματα (δημιουργία, σύνθεση, όρια χρήσεων) ανήκουν μόνο στον Προϊστάμενο Αποστείρωσης. Τον χρήστη τμήματος τον περιορίζει και η ίδια η βάση δεδομένων: σε Σετ και εργαλεία αλλάζει μόνο ό,τι αλλάζει η δική του ροή (αποστολή προς

Αποστείρωση από το τμήμα, χρήσεις, εκτός χρήσης στο όριο, καταμέτρηση) και τις εκκρεμότητες μόνο τις δημιουργεί· οτιδήποτε άλλο στείλει μένει όπως ήταν.

Ροή Αποστείρωσης

Τα στάδια από την παραλαβή έως την αποδέσμευση. Ενεργοποιήστε μόνο τα στάδια και τους ελέγχους που κάνει η Κεντρική Αποστείρωση του νοσοκομείου σας. Στην πολιτική αποδέσμευσης ορίζετε αν απαιτείται συγκεκριμένος δείκτης· χωρίς απαίτηση αρκεί ένας επιτυχής (χημικός ή βιολογικός).

Ρόλοι και Ρυθμίσεις

Οι «Ρόλοι» εξηγούν τι κάνει κάθε ρόλος, για να διαλέγετε σωστά στις εγκρίσεις. Στις «Ρυθμίσεις» ορίζετε πότε ένα εργαλείο εμφανίζεται με «Λίγες χρήσεις», την προεπιλεγμένη διάρκεια αποστείρωσης (2, 3 ή 6 μήνες), την ετικέτα barcode του νοσοκομείου (μέγεθος, κεφαλίδα, λογότυπο) και το «Κλείδωμα οθόνης μετά από αδράνεια» (προεπιλογή 15 λεπτά, ή Ποτέ): σε κοινόχρηστα tablet η οθόνη κλειδώνει όταν δεν χρησιμοποιείται, ξεκλειδώνει με το συνθηματικό του ίδιου χρήστη ή άλλος χρήστης συνδέεται ως ο εαυτός του· ο συγχρονισμός συνεχίζει από πίσω και τίποτα δεν χάνεται.

Χρήστες & Τμήματα

Οι χρήστες, οι προσκλήσεις, οι αιτήσεις πρόσβασης και τα τμήματα του νοσοκομείου.

Για ποιον: Διαχειριστής νοσοκομείου

Βήμα προς βήμα

1. Τμήματα: βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα.
2. Χρήστες → «Προσθήκη χρήστη»: πρόσκληση ατόμου, κοινός σύνδεσμος ή CSV.
3. Εγκρίνετε τις αιτήσεις με τον σωστό ρόλο.
4. Πατήστε «Ανανέωση» για τις τελευταίες αιτήσεις.

Γενικό Νοσοκομείο Δοκιμών
Χρήστες, προσκλήσεις και τμήματα του νοσοκομείου.

Χρήστες: 9 | Τμήματα: 10

Αναζήτηση ονόματος, email, τμήματος ή ρόλου...

1 αίτηση περιμένει έγκριση
Ελέγξτε τα στοιχεία, επιλέξτε ρόλο και τμήμα και εγκρίνετε. Ο χρήστης έχει ήδη όνομα χρήστη και κωδικό· με την έγκριση λαμβάνει ένα email και συνδέεται.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
p.rigas@hospital.test · Ζήτηση Χειρουργείο · 09/10/2026 00:02

Ρόλος: Χρήστης Τμήματος | Τμήμα: Χειρουργείο | Σχόλιο (προαιρετικό):

Εγκριση **Απόρριψη**

ΧΡΗΣΤΗΣ	ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ	ΤΜΗΜΑ	ΡΟΛΟΣ	ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Αριστείδης Φιλοκώστας admin@hospital.test	admin	Όλο το νοσοκομείο	Διαχειριστής νοσοκομείου	Ενεργός
Γεώργιος Αντωνίου supervisor@hospital.test	supervisor	Κεντρική Αποστείρωση	Προϊστάμενος Αποστείρωσης	Ενεργός
Δημήτρης Λαμπρόπουλος staff3@hospital.test	staff3	Γυναικολογική Κλινική	Χρήστης Τμήματος	Ενεργός
Ελένη Κωνσταντίνου viewer@hospital.test	viewer	Όλο το νοσοκομείο	Παρατηρητής (μόνο προβολή)	Ενεργός
Κατερίνα Ιωάννου staff4@hospital.test	staff4	ΜΕΘ	Χρήστης Τμήματος	Ανενεργός

Πρόσκληση

«Προσθήκη χρήστη» → «Πρόσκληση ατόμου»: ρόλος, email και (αν θέλετε) τμήμα. «Αποστολή email» στέλνει τον σύνδεσμο εγγραφής· «Αντιγραφή συνδέσμου» τον αντιγράφει για να τον στείλετε όπως θέλετε (Viber, SMS). Ισχύει 7 ημέρες. Ο χρήστης συμπληρώνει όνομα, τμήμα και κωδικό και βλέπει αμέσως το όνομα χρήστη του. Μέχρι να κάνει εγγραφή η πρόσκληση φαίνεται εδώ, όπου την ξαναστέλνετε, αντιγράφετε τον σύνδεσμο ή την ακυρώνετε.

Κοινός σύνδεσμος και CSV

Για πολλούς μαζί: ο «Κοινός σύνδεσμος νοσοκομείου» (10 ημέρες) μοιράζεται στο προσωπικό, κάνουν εγγραφή με τον ίδιο τρόπο και τους εγκρίνετε. «Από αρχείο CSV» (Ονοματεπώνυμο; Email;

Τμήμα; Ρόλος) δημιουργεί αμέσως τους λογαριασμούς χωρίς έγκριση και ο καθένας λαμβάνει email με όνομα χρήστη και σύνδεσμο κωδικού.

Έγκριση

Τα αιτήματα εμφανίζονται πορτοκαλί, με αριθμό στο καμπανάκι (δεν στέλνεται email). Ελέγξτε όνομα, email και τμήμα, ορίστε ρόλο και πατήστε «Έγκριση» ή «Απόρριψη». Με την έγκριση ο χρήστης λαμβάνει ένα email και συνδέεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που όρισε· με την απόρριψη λαμβάνει ένα email και ο λογαριασμός του διαγράφεται.

Χρήστες

Πατώντας έναν χρήστη αλλάζετε ρόλο, τμήμα, πρόσβαση Demo ή τον απενεργοποιείτε. «Αποστολή συνδέσμου αλλαγής κωδικού» βοηθά όποιον ξέχασε τον κωδικό. Η «Διαγραφή» αφαιρεί εντελώς τον λογαριασμό· το ιστορικό κινήσεων του μένει.

Τμήματα

Προσθέστε, μετονομάστε ή απενεργοποιήστε τμήματα. Τα ονόματα εμφανίζονται στις εγγραφές, στις εισαγωγές και σε όλες τις λίστες· απενεργοποιημένο τμήμα δεν προσφέρεται σε νέους χρήστες.

Έλεγχοι

- Κάθε χρήστης τμήματος έχει το σωστό τμήμα.
- Όσοι έφυγαν από το νοσοκομείο είναι ανενεργοί ή διαγραμμένοι.

Συμβουλή. Αν ένα email πρόσκλησης δεν φτάνει, ζητήστε να ελέγξουν τα ανεπιθύμητα ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο και στείλτε τον εσείς.

Γλωσσάρι

Όνομα χρήστη / Username

Ο προσωπικός κωδικός σύνδεσης (π.χ. GN1234: τα αρχικά και τέσσερα ψηφία). Έρχεται με το email έγκρισης· συνδέεστε με αυτό ή με το email σας.

Αίτηση πρόσβασης

Η εγγραφή ενός νέου χρήστη που περιμένει την έγκριση του διαχειριστή του νοσοκομείου. Μέχρι την έγκριση δεν υπάρχει λογαριασμός ούτε κωδικός.

Πρότυπη σύνθεση

Τι πρέπει να περιέχει ένα Σετ (κωδικός, ονομασία, ποσότητα). Συγκρίνεται με τα πραγματικά εργαλεία του για να φανούν οι ελλείψεις.

Έλεγχος ονομασιών

Εργαλείο που κάνει ενιαίες τις ονομασίες: ίδια γραφή και μία ονομασία για κάθε κωδικό.

Παρατηρητής / Viewer

Λογαριασμός μόνο προβολής (π.χ. Νοσηλευτική Διεύθυνση): βλέπει επισκόπηση, μητρώα, εκκρεμότητες, ιστορικό και αναφορές όλου του νοσοκομείου, χωρίς να αλλάζει τίποτα. Τον δημιουργεί ο διαχειριστής του νοσοκομείου.

Σετ / Set

Ομάδα εργαλείων με συγκεκριμένη σύνθεση που αποστειρώνεται και κυκλοφορεί μαζί.

Μεμονωμένο / Standalone

Εργαλείο που ανήκει σε τμήμα και κυκλοφορεί μόνο του, εκτός Σετ.

Απόθεμα / Stock

Διαθέσιμα εργαλεία εκτός Σετ και τμημάτων, για συμπλήρωση Σετ.

Όριο χρήσεων

Πόσες φορές επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο πολλαπλών χρήσεων. Μειώνεται κατά μία σε κάθε αποστολή μετά από χρήση.

Εκτός χρήσης

Εργαλείο που συμπλήρωσε το όριο χρήσεων· φεύγει από τις λίστες και μένει ως ιστορικό στις αναφορές.

Κωδικός ασθενούς

Αναγνωριστικό για ιχνηλασιμότητα, χωρίς ονοματεπώνυμο.

Barcode

Μοναδικός κωδικός κάθε Σετ (S...) ή εργαλείου (T...) για σάρωση.

Αποδέσμευση

Έλεγχος μετά τον κύκλο αποστείρωσης που επιτρέπει τη χρήση του αντικειμένου.

Φορτίο

Τα Σετ και τα εργαλεία που μπαίνουν μαζί στον ίδιο κύκλο κλιβάνου· αποδεσμεύονται ή επιστρέφουν σε επανεπεξεργασία όλα μαζί.

Χημικός / βιολογικός δείκτης

Δείκτες που μπαίνουν στο φορτίο και δείχνουν αν ο κύκλος πέτυχε. Δηλώνονται στη φόρτωση, το αποτέλεσμα τους γράφεται στην αποδέσμευση· αρκεί ένας επιτυχής.

Διάρκεια / λήξη αποστείρωσης

Πόσο μένει αποστειρωμένο ένα Σετ ή εργαλείο (2, 3 ή 6 μήνες από την αποδέσμευση). Ειδοποίηση τον τελευταίο μήνα (10 ημέρες για δίμηνη).

Ανάκληση

Διαδικασία που μπλοκάρει την κυκλοφορία αντικειμένων από προβληματικό κύκλο.

Χρωματική σήμανση

Έγχρωμες ταινίες που αναγνωρίζουν το Σετ ή το εργαλείο με μια ματιά.